

UNDERLAY


MODELL 1: DISTAL OFFEN

SCHRITT 1

Umfang (U)

U = 10 cm vom distalen Stumpfende

Wird eine Kniekappe verwendet, soll der Underlay innerhalb der Kniekappe enden.

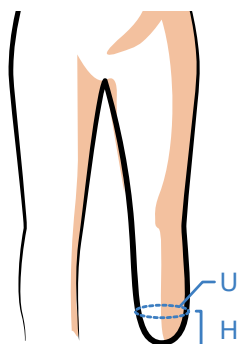

Größen:

U ist zwischen 20 und 25 cm = **S**

U ist zwischen 25 und 30 cm = **M**

U ist zwischen 30 und 42 cm = **L**


Der Umfang wird oberhalb des Linerrands auf der Haut gemessen.

Liegt der Umfang über 35, 45 bzw. 55 cm, wählen Sie die geschlossene Variante des Underlays.

SCHRITT 2

Länge (L)

Länge des zugeschnittenen Liners

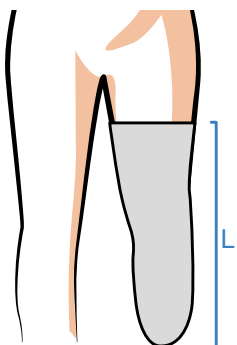

Größen:

L ist zwischen 23 und 26 cm = **1**

L ist zwischen 26 und 30 cm = **2**

L ist zwischen 30 und 33 cm = **3**

L ist größer als 33 cm = **4**

MODELL	UMFANG (U)	LÄNGE (L)	ARTIKELNUMMER
MODELL 1 Distal offen	S = 20 - 25 cm M = 25 - 30 cm L = 30 - 42 cm	1 = 23 - 26 cm 2 = 26 - 30 cm 3 = 30 - 33 cm 4 > 33 cm	211B36 = ☒ 1 Modell ☐ Umfang (U) z. B. S ☐ Länge (L) z. B. 1


UNDERLAY

MODELL 2: DISTAL GESCHLOSSEN

SCHRITT 1

Umfang (U)

U = 10 cm vom distalen Stumpfende

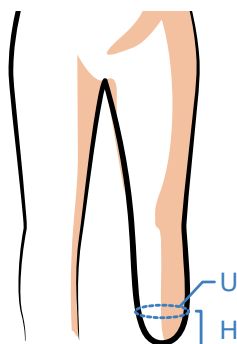

Größen:

U ist zwischen 20 und 25 cm = **S**


U ist zwischen 25 und 30 cm = **M**

U ist zwischen 30 und 42 cm = **L**

SCHRITT 2

Länge (L)

Länge des zugeschnittenen Liners

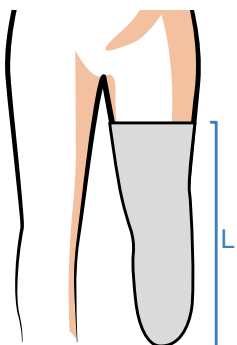

Größen:

L ist zwischen 27 und 37 cm = **1**

L ist größer als 37 cm = **2**

MODELL	UMFANG (U)	LÄNGE (L)	ARTIKELNUMMER
MODELL 2 Distal geschlossen	S = 20 - 25 cm M = 25 - 30 cm L = 30 - 42 cm	1 = 27 - 37 cm 2 > 37 cm	211B36 = ☒ 2 Modell ☐ Umfang (U) z. B. S ☐ Länge (L) z. B. 1